


BEURER BF-700 BÁSCULA DIGITAL DIAGNÓSTICA NEGRA CON BLUETOOTH DE VIDRIO

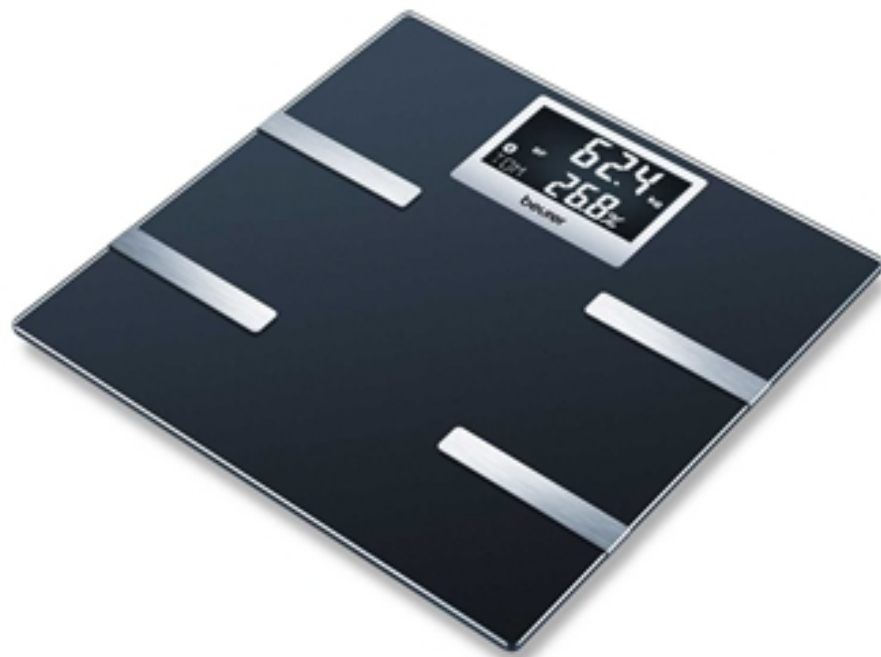

Esta báscula diagnóstica Bluetooth dispone de una **pantalla LCD negra con iluminación blanca** que muestra los valores de medición siempre a la vista. **Gracias a la aplicación Health Manager o Body Shape podrás transferir los datos automáticamente a tu dispositivo móvil vía Bluetooth.** Podrás controlar tu peso, grasa corporal, agua corporal, masa muscular, masa ósea, información calórica y el **IMC** y seguir su evolución fácilmente en tu Smartphone. La báscula **se enciende automáticamente** y comienza a realizar la medición cuando el usuario se coloca sobre ella.

- Beurer Connect – Health Manager/ Body Shape.

- Medición 180 Kg / 100 gr.

- **Pantalla que muestra las 3 iniciales del usuario.**

- **Pantalla LCD; grandes dígitos (2.3 cm).**

- Función tecnología Bluetooth®SMART (4.0)*. App.

- Transmisión automática de los datos vía Bluetooth.

- 4 electrodos de acero inoxidable mate.

- Memoria para 8 personas.

- Puesta en marcha encendido rápido.

- Apagado automático.

- Vidrio seguridad.

- Sist. de peso en Kg/lb/st.

- Pilas (3x1.5 V AAA) incluidas.

*** MEDIDOR:**

- Indicación grasa corporal: 0.1%.

- Indicación agua corporal: 0.1%.

- Indicación ratio muscular: 0.1%.

- Regulador deportistas 5 niveles.

<https://youtu.be/oWEnJgP-cYg>

<https://youtu.be/FASJ47vqSN4>

DATOS LOGÍSTICOS:

Código de Barras: 4211125748340

Unidades de Embalaje: 3

Medidas producto (An-Al-Pr): 30,00 X 30,00 X 2,30 cm

Peso neto producto: 1,520 Kg

Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 4,80 X 35,00 X 35,00 cm

Peso bruto embalaje unitario: 2,030 Kg

Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 16,20 X 37,40 X 36,20 cm

Peso bruto embalaje: 6,470 Kg



* iPhone 4S o superiores y Smartphones Android con Bluetooth® Smart (Android 4.3)

PUESTA EN MARCHA BF 700



Insertar pilas



Activar el Bluetooth
en el Smartphone



Instalar la App Beurer
Healthmanager



Iniciar la App y seguir
las instrucciones



Seleccionar BF 700
en la APP



Asignar el usuario
cuando la App lo
solicite